

使用前請詳細閱讀



緊急處理方法：

1. 當發現產品冒煙異味時，請立即拔掉電源線並通知原廠服務人員處理。
2. 若電源線損壞時，必須製造廠或具有類似資格的人更換以避免危險。



電器安全注意事項

1. 拔掉電源時，請勿直接拉拔電線部位，應手握插頭部位，以免造成固障，產生危險。
2. 請於使用前確認所用的電源規格是屬於安全標準的。
3. 請勿放置於會產生高溫（38度C以上）的電器附近或場所內。
4. 機器內部，請勿滴入飲料、水或著其他液體、粉末等物質。
5. 請勿使用於水氣過重的場所，或入浴中也請勿使用。
6. 使用完畢後，請用濕紙巾或衛生紙沾濕，將探頭上殘留的保養品擦拭乾淨，將保護蓋蓋上並將電源拔除。



各部位名稱

*該部份配件，所有機型均有安裝，請參考使用。



*該部份配件，唯 KBF-R02有安裝，其他機型未安裝，未安裝機型請免於參考。





安全性注意事項

1. 為使用上的舒適與安全考量，使用前請詳加注意，務必詳閱內容與遵循。
2. 禁止的事項，請務必依照內容指示安裝與操作
3. 請勿改造、分解，私自修理，除專指定合格之修理人員外，不得分解與維修。
4. 請勿與其他大電力之電器共同使用同一插座。
5. 收藏於陰涼、乾燥的場所。
6. 塗抹探頭的擦拭清潔與保養請用棉紙擦拭即可
7. 未使用時請務必將電源轉換器拔離插座。





適用肌及部位

1. 適用於手臉部位及四肢肌膚部位的保養品。
2. 適用於一般保養品的保養過程中使用，但使用前，肌膚請先點上適合膚質之個人保養品。
3. 肌膚上有斑點或色素不均勻部位，可適用之，但務必塗抹適合該種肌膚使用的乳液或保養品
4. 肌膚上有較多毛髮部位，如頭髮、私處等，不適用。
5. 肌膚上有長青春痘部位，不適用，請待肌膚正常後即可使用。
6. 肌膚上有細紋或表面不平之部位，可適用。



肌膚保養使用事項


1. 選擇出適合的能量與需要使用部位，並開啟保養功能，使用時請勿直接用於肌膚，請先於肌膚點上保養品乳液。
2. 在需要按摩的部位上，均勻擦拭少許乳液，因 每塗抹面積大約半臉頰，所以不用擦拭太寬的皮膚面積，使用前再一一擦拭即可。

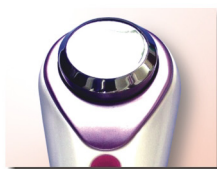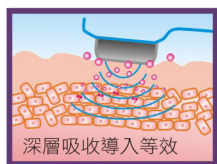



臉部清潔時使用事項

1. 用於清潔使用時，請在探頭加上，適合個人膚質的化妝綿，並在化妝綿上滴上數滴臉部用清潔液或化妝水等。
2. 選擇適當的能量，選擇在臉部清潔的功能，在臉部作畫小圓的導出方式，所有清潔流程，請依個人卸妝、清潔護膚過程搭配使用。

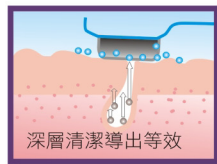

使用方法

1. 在開始使用前，請選擇適合且正確的電壓插座。
2. 將美容儀的保護蓋取下。
3. 將乳液或是保養品塗於將按摩的部位。
4. 按下電源，並選擇模式。此時電源顯示燈會亮起，並且將探頭平貼於肌膚。
5. 動作以劃圈式或雙向的滑動方式，最符合人體工學。
6. 若有較長時間休息不使用時，請務必將主機電源關閉，並拔離插座。
7. 初期使用每週以使用二至三次最適當，兩週後即可天天使用。



避免事項






有以下部位之皮膚疾病者，該部位請勿使用：

1. 過敏性肌膚或部位，前期使用時，請將能量調至最低，或前期使用時間減少(約使用3-5分鐘)。
2. 有發炎皮膚部位或開放性傷口的部位，請待完全復原後，才可使用。
3. 因保養品或其他化學物質所致產生的受傷部位
4. 濕疹、外傷縫合或傷口未癒合部位，請勿使用
5. 會產生粘膜部位(口、鼻、眼睛與下體私部等部位，請勿使用)。
6. 有肌膚或有媒介性傳染病者，請勿與他人共同使用。
7. 有因使用不適或不瞭解使用方法者，歡迎來電詢問。



更多關於各個部位的建議使用說明

1. 臉部使用：美容儀對於臉部的使用時間應該被控制在10分鐘之內。在使用的過程中，應將美容儀遠離眼部部位、嘴唇部位、喉結、以及喉嚨部位。
2. 額頭：按摩方向由下往上，以一分鐘為限。
3. 頰側部位：按摩方向由下往上，由邊頰往太陽穴方向移動，以三分鐘為限。
4. 眼下前頰部位：以傾斜的角度由下往上進行以三分鐘為限。
5. 頸部部位：美容儀遠離喉結。按摩方向由下往上，以四分鐘為限。
6. 下巴部位：由下巴中心往兩側向外(向耳朵方向)移動，按摩方向由下往上，並遠離喉嚨中心部位，以五分鐘為限。
7. 眼袋：在進行中，請小心將美容儀遠離眼球。按摩方向由臉部中心往外移動，以一分鐘為限。
8. 臀部美容療程：在臀部中心，由下往上進行按摩。
9. 腰部以及下腹部：在進行腰部的美容過程時，按摩方向應由兩側往中間移動，肚臍附近則應以順時針方向進行圓圈按摩。下腹部的按摩，按摩方向應由較下方部位往上方的部位來移動進行按摩。

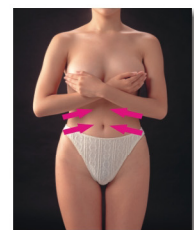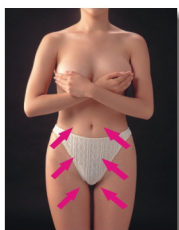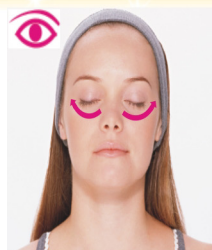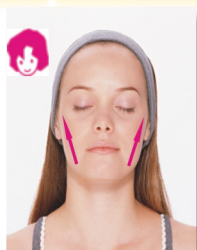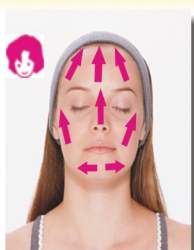

* 請勿在同一個範圍使用美容儀過久，在按摩過程建議使用前後移動或劃圓的方式進行，以避免過度集中按摩對皮膚產生灼熱感。並選擇在適當的能量。



美容儀使用 Q&A

- Q：請問我有按照手冊指示的方法使用，可是不知道有無產生超聲能？
- A：可以在探頭上點上兩滴水，看看水面有產生波紋，或產生霧化，一般來說，新機約在使用約 5至7次後，效能會慢慢增大，也可開機後空轉3-4分鐘，其探頭會有溫熱的感覺，代表有產生超聲能。
- Q：離子感覺到了嗎？
- A：離子的感覺，有一點點刺刺感，因環境與握機方式，會有不一樣，在機器背面有一片銀亮的區域，只要掌心接觸到這個區域，使用時就有離子產生。
- Q：為什麼與超聲波共同整合在一起，有什麼好處？
- A：各類護膚品適合的導入工具與方式不一樣，但多數的護膚品均無標示適合的工具，固在設計工具時克服技術上的困難，將兩種方式整合在一起，並同時產生，使用時便能適合所有護膚品。
- Q：我已有很多保養品，是否每一樣都能搭配？
- A：適合美容儀搭配使用之保養品有如下幾種：營養乳液，營養霜，精華液，果酸，膠原蛋白等對可被肌膚吸收之保養品，去角質類與面膜類的產品比較不適合搭配美容儀使用。
- Q：使用的感覺不錯，可不可以一直連續使用？
- A：雖然美容非常安全，不會傷害肌膚，但所有物品使用過度總是不好，建議每天以一至二次最適當。每次使用時須間隔一小時以上。

- Q：我不知道那些部位不可使用？
- A：使用在臉部時，眼睛部位(眼皮，眼珠)須避開，身體如有傷口，或剛手術完三個月內之部位，有植入物如矽膠，水袋等部位，不要使用，其他可以參考前面頁之避免事項。

* 使用小訣竅

1. 在保養過程中使用最後一道保養品時(如：營養霜、精華液等)再來做導入，但不可全臉都抹了保養品，而是依您個人習慣那裡先抹就在那先做導入，(如：額頭 臉頰以此類推來做導入)。
2. 或是您有針對皮膚做改善的保養品，(如左旋 C、膠原蛋白等)在這個保養品過程作導入也是會 對您有很好的效果產生哦！您切記了上述導入的小訣竅哦！



1. 插入電源插頭。
2. 將探頭的保護蓋取下。
3. 打開電源，並滴一滴水在探頭上。

你便可以馬上看到探頭上水滴在震動，表示機器正確運作。



產品名稱：美容導入儀
型 號：KBF-R01/KBF-R02
產品規格：170*60*100mm
額定電壓：AC110V/50Hz
消耗電力：5W
產 地：台灣
經銷商：歌林股份有限公司

歌林對顧客服務的承諾永遠不變

本項產品已全權委託專業技術服務站，若需維修請洽下列服務站，或是送回原購買處處理。

服務中心	地 址	電 話
台北服務站	台北市松山區塔悠路231號1樓	(02)2747-8833

售後服務商：仕華國際有限公司
消費者服務專線：0800-858-988

本商品如有故障及諮詢，請洽以上服務站或原購買處。

歌林股份有限公司

台北市重慶南路一段86號10樓 TEL: (02)2314-3151

委製廠商：維電科技有限公司 嘉義縣民雄鄉金興村忠義街52號 TEL：(05)220-8099
產地：台灣

kol*in*

歌林美容導入儀

KBF-R01
KBF-R02

使用説明書



- 謝謝您的惠顧，使用前請詳細閱讀本說明書。
- 本產品附有保證書，請妥善保管，享受服務。